


АППАРАТ ДЛЯ УВЧ-ТЕРАПИИ ПЕРЕНОСНОЙ УВЧ-30.03-«НАНЭМА».

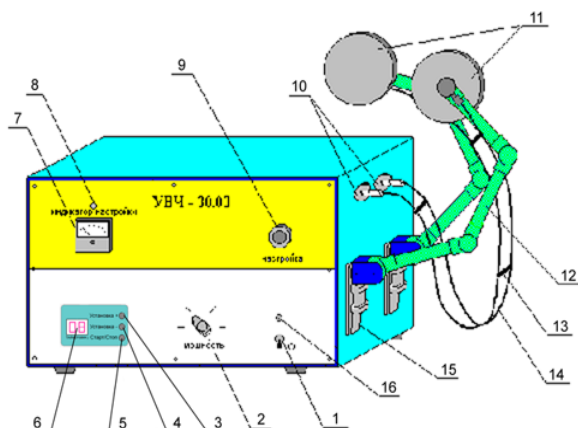

1 - тумблер СЕТЬ, 2 – переключатель МОЩНОСТЬ, 3,4 – кнопки установки таймера «+» и «-», 5 – кнопка таймера «Старт-Стоп», 6 – индикатор таймера, 7 - индикатор выходной мощности, 8 - светодиод индикации режимов работы, 9 - ручка НАСТРОЙКА, 10 – разъем, 11 – электроды, 12 – электрододержатель, 13 - фиксатор, 14 - провод высокочастотный, 15 – кронштейн, 16 - светодиод индикации включения сети.

В комплект аппарата входят: комплект электродов Ø 36 мм, Ø 80 мм, Ø 113 мм по 2 шт, аппликатор вихревых токов ЭВТ, держатели электродов, индикатор настройки УВЧ-аппаратов, вставки плавкие, провод, фиксаторы, паспорт.

Аппарат предназначен для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полями ультравысокой частоты в зависимости от применяемых электродов.

В зависимости от интенсивности поля УВЧ-терапии применяется при острых, хронических, воспалительных и гнойных процессах (фурункулы, карбункулы), при дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов и позвоночника; воспалительных заболеваниях в стоматологии и оториноларингологии.

Представляет собой ламповый генератор ультравысокой частоты с помехоподавляющими устройствами, позволяющими производить его эксплуатацию без экранирующих кабин. В аппарате имеется встроенный таймер от 1-99 мин. По истечении установленного времени выполнение процедуры прекращается автоматически и подается звуковой сигнал.

В комплекте аппарата имеется аппликатор вихревых токов ЭВТ-1, применяемый для лечения магнитным полем.

Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение (диапазон)
1. Питание от сети переменного тока: - напряжением - частотой	220 В 50 Гц
2. Мощность, потребляемая из сети	160 В•А
3. Частота колебаний	27,12 МГц ± 0,16 МГц
4. Максимальная выходная мощность: - 1 ступень - 2 ступень - 3 ступень	10 Вт ± 2 Вт 20 Вт ± 4 Вт 30 Вт ± 6 Вт
5. Габаритные размеры	425x230x260 мм
6. Масса, не более	10 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69